




## Estableciendo Lenguaje en Acción: Apoyos de Familia e Intervención Temprana para Bebés Sordos o Hipoacúsicos

### Cómo Limpiar la Prótesis Auditiva

En los audífonos detrás de la oreja, las prótesis auditivas se insertan en los canales del oído. Las prótesis auditivas acumulan cerumen y necesitan ser limpiadas con regularidad. Se recomienda limpiar cada prótesis auditiva al menos una vez por semana (más frecuentemente si el niño produce una gran cantidad de cerumen en los oídos).

**Separe delicadamente el tubo de la prótesis auditiva, del gancho de oreja del audífono.**

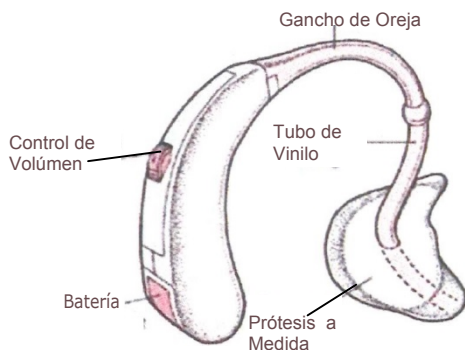

**Importante:** Si la audición del niño es diferente en cada oído, los ajustes internos de cada audífono deben establecerse de manera diferente. Si es así, es necesario mantener los audífonos de la derecha e izquierda separados, para no colocarlos en los oídos equivocados.

**Nota:** Cada audífono debería tener algún tipo de marca indicando la izquierda o la derecha. Típicamente es rojo (para el derecho) o azul (para el izquierdo) se coloca en algún lugar cerca a la puerta del compartimiento de la batería. Si no se tiene un marcador, un pequeño punto de esmalte de uñas puede aplicarse a la caja exterior del audífono. Esto también puede hacerse con la prótesis

### MÓDULO TRES

Audífonos: Conceptos Básicos

Charlotte Mullen, AuD,  
Boston Children's Hospital  
Deaf and Hard of Hearing Program,  
with Lynne Graham-O'Brien, AuD,  
and Sydney Bednarz, BS

auditiva en la parte que se ubica dentro del oído. Sin embargo, asegúrese de no cubrir ninguno de los orificios de la prótesis auditiva.

#### Lave la prótesis auditiva


Ponga los audífonos en un lugar seguro para mantenerlos secos. Lave cada prótesis auditiva con un jabón delicado (como jabón de mano o de platos) y agua. Puede usarse un cepillo viejo de dientes suave para ayudar a eliminar el cerumen endurecido o suciedad. Una pequeña herramienta también puede ser utilizada para eliminar suavemente el cerumen o suciedad del interior de cualquiera de los agujeros.

#### Seque la prótesis auditiva completamente.


Seque cada prótesis auditiva, así como también el tubo que conecta al gancho de la oreja del audífono. Para secar el tubo, utilice un secador de aire o una bombilla nasal infantil, para soplar aire seco a través de él (vea el folleto de *Accesorios para Audífonos* o el video del Módulo 3). No debe haber gotas de humedad u opacidad en el tubo.

#### Vuelva a colocar la prótesis auditiva al audífono.

El borde curvado de la prótesis auditiva debe coincidir con el borde curvado del audífono, como se muestra a continuación:

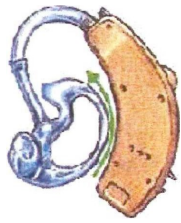

Correcto

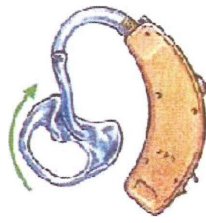

Incorrecto

Empuje suavemente el tubo hacia arriba y sobre el extremo del gancho para la oreja. El tubo debe de ser muy blando. Si el tubo se ha endurecido (esto sucede naturalmente, después de unos meses), tendrá que ser

reemplazado por el audiólogo o el vendedor. Cuando el tubo se endurece también se contrae en longitud y diámetro, cambiando la forma en la cual el audifón se adapta detrás de la oreja del niño, como el sonido es transmitido.

### Para Recursos Adicionales

Para mayores datos e información, así como recursos adicionales consulte el video del Módulo 3. También, visite nuestros sitios web: [www.bostonchildrenshospital.org/dhhp](http://www.bostonchildrenshospital.org/dhhp) y <http://clerccenter.gallaudet.edu>.